overfibers
improve your performance

# OverCEM SA

*Cemento resinoso autoadesivo a polimerizzazione duale*

***Formula innovativa autoadesiva***

***Elevata resistenza***

***Punte di auto miscelazione T-Mixer***

***Cemento adesivo multiuso***




100% ITALIANO

**FACILE**
**RESISTENTE**
**AFFIDABILE**

*www.overfibers.com*



# OverCEM SA Perni Overfibers

## Caratteristiche — Vantaggi







| | |
|---|---|
| *Active Adhesion system** | *Aumenta l'adesione con OverCEM SA* |
| *Superficie altamente ritentiva* | *Aumenta l'adesione perno/cemento* |
| *Nessuna silanizzazione necessaria* | *Risparmio di tempo clinico e denaro* |
| *Fibra di vetro* | *Elevata resistenza alla flessione* |
| *Equilibrata flessione del Modulo Elastico* | *Per migliorare la stabilità del restauro* |
| *Traslucido* | *Per accelerare l'attivazione del cemento duale* |
| *Radiopaco* | *Per essere visibile all'interno del canale* |
| *Di facile rimozione*** | *In sicurezza con assoluta certezza e senza danni ai denti* |

**Hi-Rem+ e Over Post+*
***Hi-Rem+ e Hi-Rem Post*

CE 0425

| | | OverCEM SA | T-Mixer Regular | T-Mixer Wide + Endo Tips |
|---|---|---|---|---|
| **Codice** | **Descrizione** | | | |
| *OverCEM SA Starter KIT* SKOCS | ***OverCEM SA*** Starter KIT | 1 Translucent 9,5g syringe<br>1 Universal 9,5g syringe<br>1 Opaque 9,5g syringe | 29 T-Mixer Regular | 10 T-Mixer Wide + 10 Endo Tips |
| *OverCEM SA KIT* KOCTR | ***OverCEM SA*** Translucent KIT | 3 Translucent 9,5g syringe | 24 T-Mixer Regular | 15 T-Mixer Wide + 15 Endo Tips |
| KOCUN | ***OverCEM SA*** Universal KIT | 3 Universal 9,5g syringe | 24 T-Mixer Regular | 15 T-Mixer Wide + 15 Endo Tips |
| KOCOP | ***OverCEM SA*** Opaque KIT | 3 Opaque 9,5g syringe | 39 T-Mixer Regular | |
| *OverCEM SA Refill* ROCTR | ***OverCEM SA*** Translucent | 1 Translucent 9,5g syringe | 8 T-Mixer Regular | 5 T-Mixer Wide + 5 Endo Tips |
| ROCUN | ***OverCEM SA*** Universal | 1 Universal 9,5g syringe | 8 T-Mixer Regular | 5 T-Mixer Wide + 5 Endo Tips |
| ROCOP | ***OverCEM SA*** Opaque | 1 Opaque 9,5g syringe | 13 T-Mixer Regular | |
| *T-Mixer Refill* TMREG | ***OverCEM SA*** T-Mixer Regular | 25 T-Mixer Regular | | |
| TMWE | ***OverCEM SA*** T-Mixer Wide + Endo Tip | 15 T-Mixer Wide + 15 Endo Tips | | |




***5 Perni per misura 0-1-2-3***
***1 Fresa per misura 0-1-2-3***

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *OverCEM SA & Overfibers Posts* SKOCH+ | ***OverCEM SA*** - Hi-Rem+ | 1 Translucent 9,5g syringe | 8 T-Mixer Regular | 5 T-Mixer Wide + 5 Endo Tips | 20 Posts | Hi-Rem+ | 4 Drills |
| SKOCHP | ***OverCEM SA*** - Hi-Rem Prosthetic Post | 1 Translucent 9,5g syringe | 8 T-Mixer Regular | 5 T-Mixer Wide + 5 Endo Tips | 20 Posts | Hi-Rem Post | 4 Drills |
| SKOCP+ | ***OverCEM SA*** - Over Post+ | 1 Translucent 9,5g syringe | 8 T-Mixer Regular | 5 T-Mixer Wide + 5 Endo Tips | 20 Posts | Over Post+ | 4 Drills |
| SKOCPP | ***OverCEM SA*** - Prosthetic Over Post | 1 Translucent 9,5g syringe | 8 T-Mixer Regular | 5 T-Mixer Wide + 5 Endo Tips | 20 Posts | Over Post | 4 Drills |

*Overfibers Posts - Refill*

| | *Hi-Rem+* | | *Hi-Rem Prosthetic Post* | | *Over Post+* | | *Prosthetic Over Post* | | | *Drill* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Codice** | **Descrizione** | **Codice** | **Descrizione** | **Codice** | **Descrizione** | **Codice** | **Descrizione** | **Size Ø** | **Codice** |
| ● | RHP600 | 10 Hi-Rem+ 0 | RPOP100 | 10 Hi-Rem Prosthetic Post 0 | PP700 | 10 Over Post+ 0 | POP100 | 10 Prosthetic Over Post 0 | 0.70 - 1.20 | PD100 |
| ● | RHP601 | 10 Hi-Rem+ 1 | RPOP101 | 10 Hi-Rem Prosthetic Post 1 | PP701 | 10 Over Post+ 1 | POP101 | 10 Prosthetic Over Post 1 | 0.80 - 1.40 | PD101 |
| ● | RHP602 | 10 Hi-Rem+ 2 | RPOP102 | 10 Hi-Rem Prosthetic Post 2 | PP702 | 10 Over Post+ 2 | POP102 | 10 Prosthetic Over Post 2 | 0.80 - 1.60 | PD102 |
| ● | RHP603 | 10 Hi-Rem+ 3 | RPOP103 | 10 Hi-Rem Prosthetic Post 3 | PP703 | 10 Over Post+ 3 | POP103 | 10 Prosthetic Over Post 3 | 0.90 - 1.80 | PD103 |
| | | | | | | | POP104 | 10 Prosthetic Over Post 4 | 1.10 - 2.10 | PD104 |


**Overfibers S.r.l.**
Via E. Malatesta,7 - 40026 Imola (BO) - Italy
Phone +39 0542 52 153 - info@overfibers.com
www.overfibers.com


ICIM CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

overfibers
improve your performance

04 2024

# OverCEM SA

*Cemento resinoso autoadesivo a polimerizzazione duale*


## Formula innovativa autoadesiva
*Crea un eccellente legame stabile nel tempo*

## Resistente
*Elevate proprietà meccaniche*

## Polimerizzazione duale
*Massima efficienza di polimerizzazione*

## Punte di auto miscelazione T-Mixer*
*Riducono del 30% la perdita di cemento rispetto alle convenzionali punte di miscelazione*


## Cemento multiuso
*Zirconia, Ceramiche, Metalli, Disilicati di Litio, Perni e Compositi*

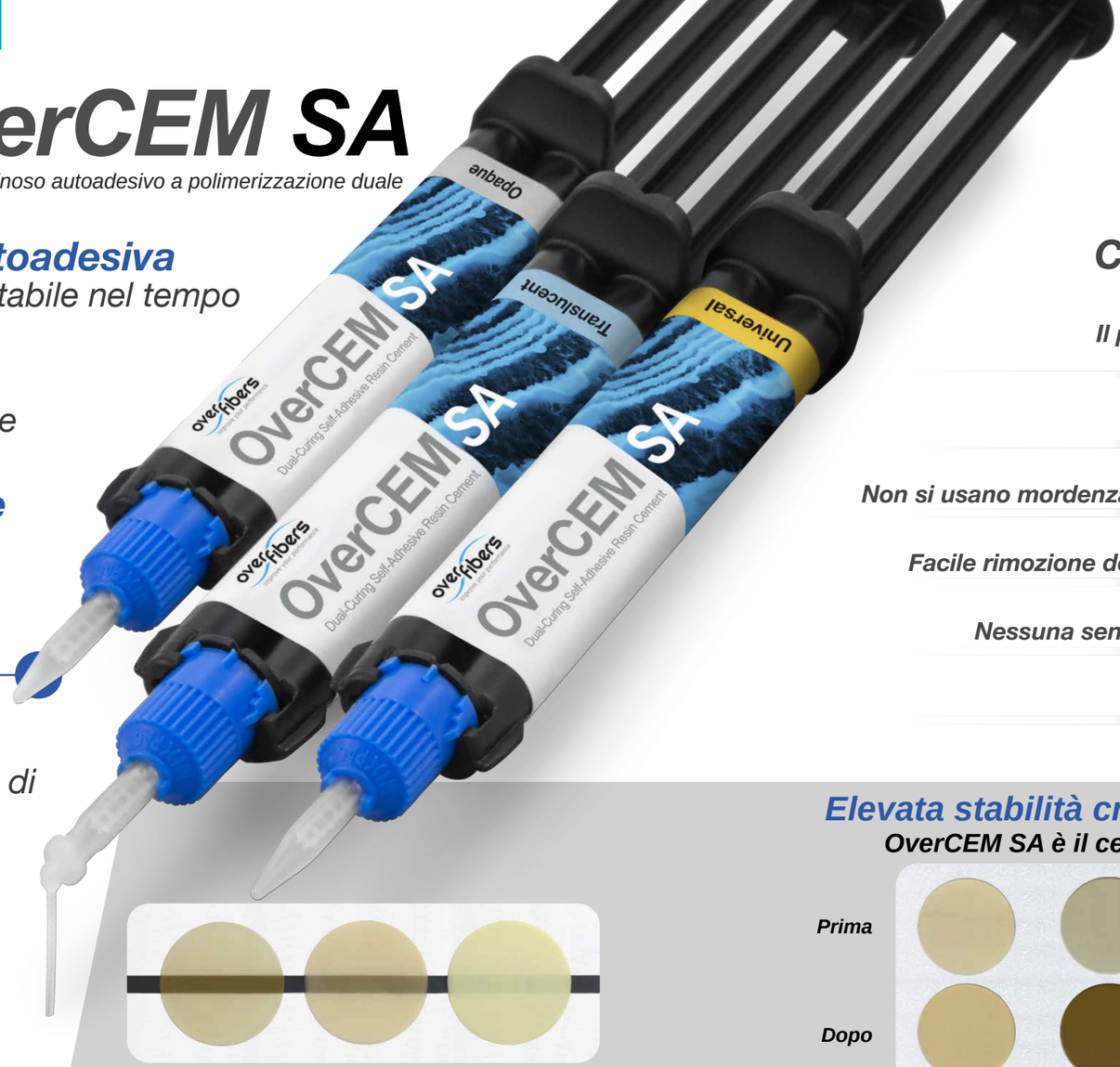




***OverCEM SA*** Translucent | ***OverCEM SA*** Universal | ***OverCEM SA*** Opaque


## Eccellente legame con Zirconia e Disilicati di Litio

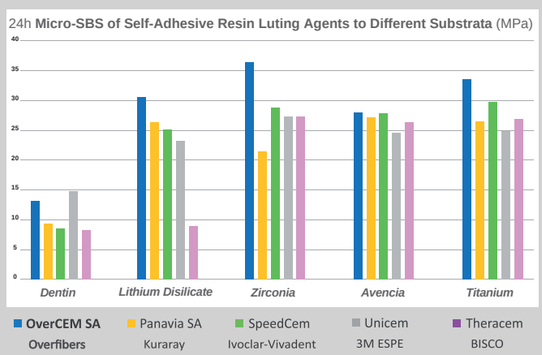


**Ciocca L[1], Baldissara P[1], Parisi C[1], Wandscher V[3], Librenti M[4], Melilli D[2]**

[1]*DIBINEM - Division of Prosthodontics and Maxillofacial Rehabilitation, University of Bologna, Italy;*
[2]*Department of Surgical, Oncological and Oral Sciences, University of Palermo, Italy;*
[3]*Prosthodontics Unit, School of Dentistry, CNEC Faculty of Santo Angelo, RS, Brazil;*
[4]*Overfibers srl R&D, Imola, Italy.*

## Eccezionale adesione ai perni in fibra Hi-Rem+ e Over Post+ !

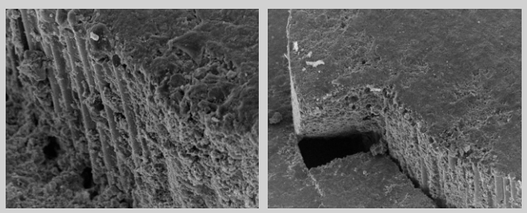

L'interfaccia perno/cemento mostra elevate forze di push-out: l'adesione tra ***Hi-Rem+*** e ***OverCEM SA*** è incrementata grazie all'innovativo ***Active Adhesion System*** nella matrice in resina del perno e alla sua superficie altamente micro ruvida maggiore a 5.0 microns (Ra)



Il cemento ***OverCEM SA*** mostra un'elevata adesione alla dentina, l'immagine microscopica evidenzia l'equilibrata adesione tra le due interfacce: cemento/dentina e cemento/perno.


# OverCEM SA

*Cemento resinoso autoadesivo a polimerizzazione duale*


| Caratteristiche | Vantaggi |
|---|---|
| *Il più piccolo auto-mixer presente sul mercato* | *La minore perdita di cemento nella punta di miscelazione* |
| *Consistenza ideale* | *Più praticità d'uso* |
| *Non si usano mordenzante, primer e adesivo* | *Risparmio di tempo e denaro* |
| *Facile rimozione del cemento in eccesso* | *Impiego più rapido* |
| *Nessuna sensibilità postoperatoria* | *Nessun disagio per il paziente* |
| *Resistente all'umidità* | *Più stabilità nel tempo* |

## Elevata stabilità cromatica per un'estetica eccezionale

***OverCEM SA è il cemento con il minor grado di assorbimento***




***OverCEM SA Universal*** | ***Concorrente 1*** | ***Concorrente 2*** | ***Concorrente 3***


***Dopo 3 giorni immerso in un caffè concentrato a 37°C, il cambiamento cromatico di OverCEM SA è trascurabile rispetto agli altri cementi SA comparati.***

*Fonte Dati interni Overfibers*

## Indicazioni d'uso

***OverCEM SA***
***Specifico per ogni esigenza***

**FORTE ADESIONE**

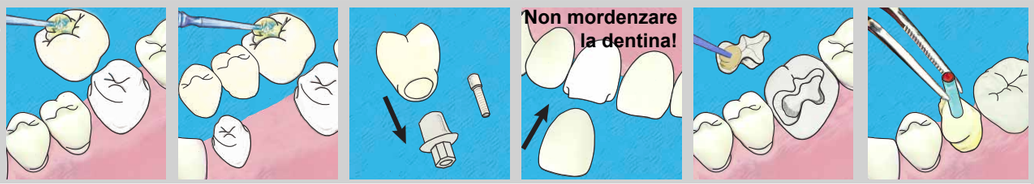


| | Corone | Ponti | Protesi implantare (avvitata, adesa su metallo) | Veneer | Inlay/Onlay | Perni endocanalari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metallo | ● | ● | ● | | ● | ● |
| Vetro ceramiche | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Zirconia | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Compositi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Impianti protesici Ceramica/Titanio, Ceramica/Co-Cr | ● | ● | ● | | | |

Modulo elastico in flessione **6524 MPa** | Resistenza alla flessione **103 MPa** | *Fonte Dati interni Overfibers*